




FQ. De weg naar een veilige endo-behandeling.



OrangeService Dental. Uw dentale partner met Focus.
Meer dan alleen een tandheilkundige leverancier



OrangeService **Dental**

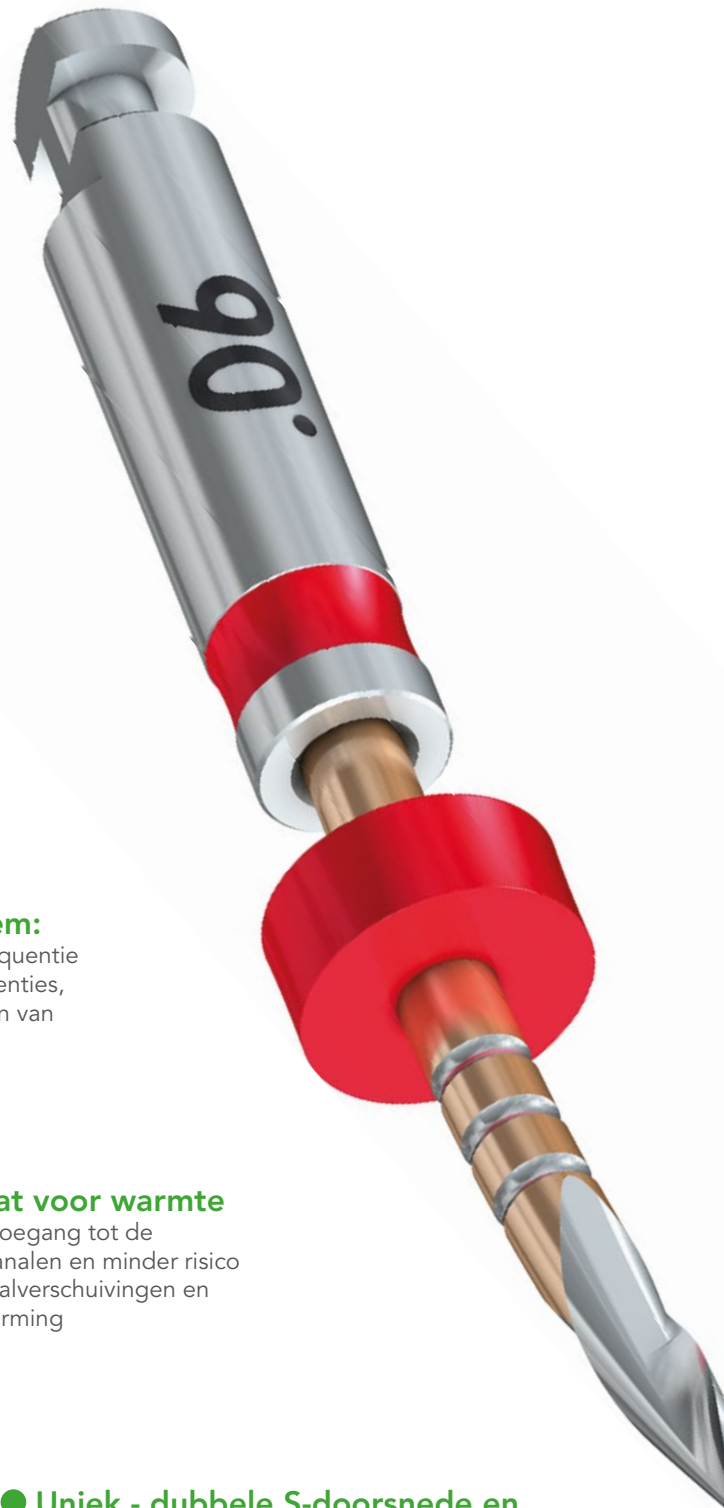

● **Veelzijdig systeem:**

Overzichtelijke basissequentie en individuele vijlsequenties, afhankelijk van de eisen van de kanaalanatomie.

● **Q staat voor warmte**

Betere toegang tot de wortelkanalen en minder risico op kanaalverschuivingen en ledgevorming

● **Uniek - dubbele S-doorsnede en variabel getaperde vijlkern*.**

Geïnfecteerd weefsel wordt nog efficiënter uit het kanaal verwijderd en de behandelingstijd wordt geoptimaliseerd.

* voor Taper 06. -instrumenten

Brasseler®, Komet®, Art2®, CeraBur®, CeraCut®, CeraDrill®, CeraPost®, DC1®, DIAO®, FastFile®, F360®, F6 SkyTaper®, H4MC®, KometBioSeal®, OccluShaper®, OptiPost®, PolyBur®, PrepMarker®, Procodile®, Procodile Q® en SHAX® zijn geregistreerde handelsmerken van Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG.

ReFlex® en EndoPilot® zijn geregistreerde handelsmerken van Schlumbohm GmbH & Co. KG

De producten en benamingen die in de tekst zijn vermeld, zijn gedeeltelijk beschermd onder het merken-, octrooi- en auteursrecht. Uit het ontbreken van een specifieke verwijzing of van het symbool © mag niet worden afgeleid, dat er geen juridische bescherming bestaat.

Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, ook die van vertaling, nadruk en verveelvoudiging - tevens van delen hieruit - zijn voorbehouden. Geen deel van het werk mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever in enigerlei vorm (fotokopie, microfilm of een andere methode) worden gereproduceerd of met gebruik van elektronische systemen worden verwerkt.

Product- en kleurwijzigingen alsmede drukfouten voorbehouden.

Versie: februari 2023

FQ.

Efficiënt, flexibel, betrouwbaar.

Elke endo-behandeling is uniek. FQ ook; een doordacht en innovatief systeem dat de behandeling gemakkelijker, efficiënter en veiliger maakt. Tevens een overtuigende totaaloplossing die de ervaring van Komet vertaalt naar een nieuwe generatie vijlen. Zelfs moeilijke tanden kunnen betrouwbaar en minimaal invasief worden behandeld met het nieuwe roterende vijlsysteem van warmtebehandeld nikkel-titanium. De innovatieve variabel getaperde vijlkern zorgt met zijn dubbele S-doorsnede voor maximale flexibiliteit en

een efficiënte verwijdering. De voorbuigbare vijlen overtuigen door een aangenaam, vlot en veilig werkgevoel. Warmtebehandeld nikkel-titanium. Beperkt het risico van vijlbreuk tot een minimum dankzij de weerstand tegen cyclische vermoeidheid. Betere toegang tot de wortelsystemen en minder risico op kanaalverschuivingen en richelvorming, omdat de vijl kan worden voorgebogen en zeer flexibel is.

Dubbele S-doorsnede.


Efficiënte behandeling dankzij hoge snijf-efficiëntie.

Bovendien zorgt de smallere instrumentenkern voor optimale flexibiliteit.

Variabel getaperde vijlkern*

Dankzij de variabel getaperde vijlkern is de spaanruimte van de vijl vergroot. Geïnfecteerd weefsel wordt nóg efficiënter uit het kanaal verwijderd en de behandelingstijd wordt geoptimaliseerd.

Dankzij het warmtebehandelde materiaal biedt de variabel getaperde vijlkern een hoge mate van flexibiliteit. Ook bij gebogen kanalen volgt de vijl de anatomie, waardoor de behandeling veiliger wordt.

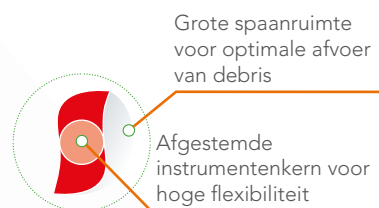

FQ. Step-by-step.

Doordacht systeem.

Tijdsbesparing bij de wortelkanaalbehandeling door slechts enkele, optimaal op elkaar afgestemde instrumenten die een overzichtelijke basissequentie

mogelijk maken. Het gevarieerde totaalportfolio maakt echter ook individuele vijlsequenties mogelijk, afhankelijk van de eisen van de kanaalanatomie.



- 01** Weergave van de kanaalingang met de FQ Opener.



- 02** Sonderen met handvijlen en mechanisch creëren van een glijpad met de FQ Glider.



- 03** Kanaalvoorbereiding met de FQ Shaping-vijlen.



- 04** Optioneel afwerken tot de gewenste prepra-ratiegrootte met de FQ Finishing Files.


Klinische casus van Rafaël Michiels
– Hasselt (België)



Uitgangssituatie



Wortelvulling

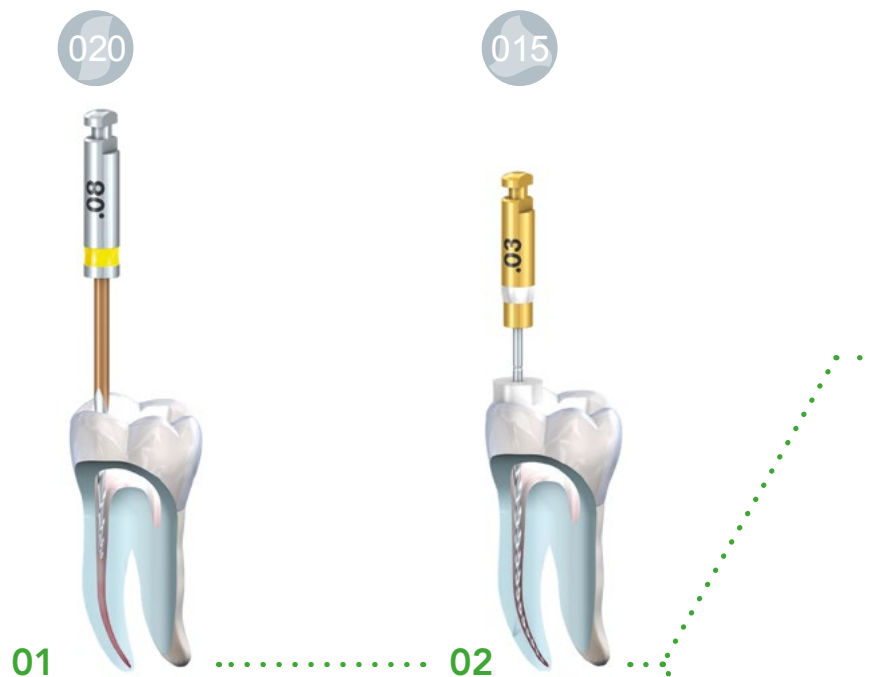


Opener FQ

Glidepath FQ


Taper .04

Voor complexere situaties

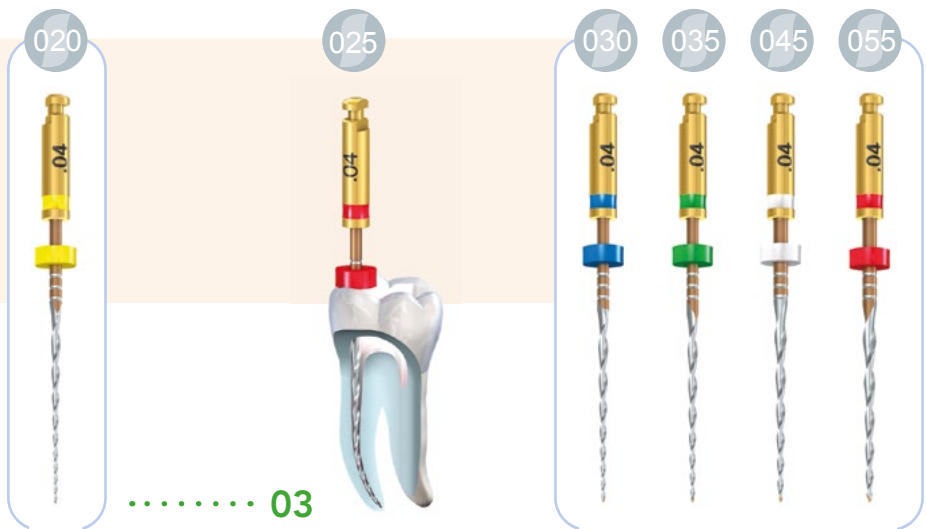

Taper .06

Voor de meeste klinische gevallen

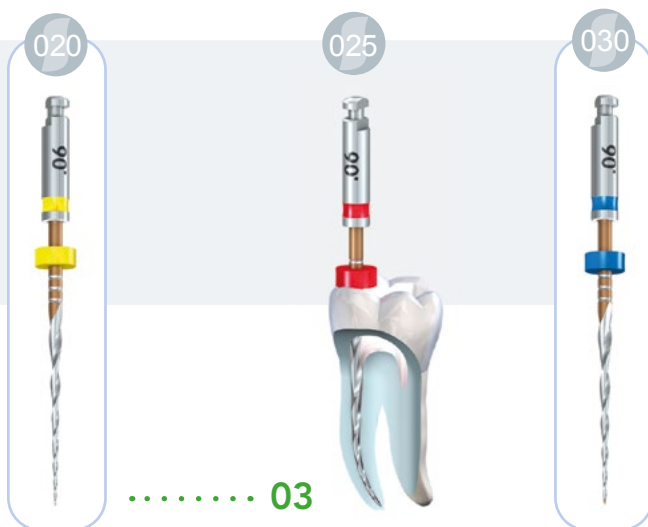

Basissequentie

Shaping

Shaping

Finishing (optioneel)

FQ.

Step-by-step.

FQOpener

- Vergroten van de opening voor toegang tot de kanalen



● FQ8L18.204.020

FQGlider

- creëren van een functioneel, reproduceerbaar glijpad
- Minder risico op ledge vorming



○ FQ03L25.204.015

FQ-vijlen

met afgestemde Taper .04



● FQ04L25.204.020



● FQ04L25.204.025



● FQ04L25.204.030



● FQ04L25.204.035



○ FQ04L25.204.045



● FQ04L25.204.055

FQ-vijlen

met afgestemde Taper .06



● FQ06L25.204.020



● FQ06L25.204.025



● FQ06L25.204.030

Verkrijgbaar in de lengten 21 mm, 25 mm en 31 mm [6 vijlen per blister]

FQ-vijlenassortiment SORT207

● FQ08L19.204.020

○ FQ03L25.204.015

● FQ04L25.204.020

● FQ04L25.204.025

● FQ04L25.204.030

● FQ04L25.204.035

FQ-papierpunten

afgesteld op de voorbereiding met het FQ-systeem. Kleurgecodeerd en gegradueerd.



STERILE R

| | Toerental [rpm] |
|--------------------------|-----------------|
| FQ Opener | 2,4 |
| FQ Glider | 0,8 |
| FQ Taper .04 (020 - 035) | 1,8 |
| FQ Taper .06 (020 - 030) | 2,4 |
| FQ Taper .04 (045 - 055) | |

snelheid [rpm]

300 (max. 500)

FQ.

De accessoires.

Endo Sequencer
97521



Praktische tip: Klik op de producten om ze te bekijken!

OrangeService Dental

Daltonstraat 1
3335 LR Zwijndrecht

Nederland

+31 (0) 23 549 30 40
info@orangeservicedental.nl
www.orangeservicedental.nl

België

+32 (0) 38 080 935
info@orangeservicedental.be
www.orangeservicedental.be

Garrison
Dental Solutions

Komet

ZYRIS[™]

SCORE[®]
seats to suit

∞ **BIOCLEAR**

OrangeService Dental. Uw dentale partner met Focus.
Meer dan alleen een tandheelkundige leverancier



OrangeService **Dental**